

ÜCRETSİZ YEDEK PARÇALAR (GARANTİ)

Tutma kayışı, konfor bantları ve garantisi dolmuş yedek parçalar dışında tüm parçalar 36 ay garantili olup ücretsiz olarak gönderilir. (Firmamızın Genel Şirket Şartnamesine bakınız):

- Fatura tarihine bakarak PeniMaster® aletinizin 3 yıldan eski olup olmadığını kontrol edin.
- Anzalı parçayı, faturanın bir kopyası ile birlikte paketin üzerine yeterli miktarda pul yapıştırarak aşağıdaki adrese postalayınız. VEYA
- Fatura belgesinden iyi derecede okunabilir dijital bir kopya yapın (örneğin tarayıcı ile) ve arızalı parçanın arızalı bölümü açıkça görülecek şekilde fotoğrafını çekin. Fatura kopyası ve fotoğrafı .jpg- ve/veya .gif-dosyası olarak şu e-mail adresine gönderin:
→ www.penis.de

TUTMA KAYIŞLARI, KONFOR BANTLARI VE GARANTİSİ DOLMUŞ PARÇALAR

Tutma kayışları, konfor bantları ve garantisi dolmuş aletler için yapılacak yedek parça siparişlerinde şu internet adresini kullanın: www.penis.de/yedek-parcalar

GRATIS RESERVEDELE (GARANTİ)

I 36 måneder erstatter vi alle dele med gratis reserve dele undtagen holde remme, komfortbånd og reserve dele med forfalden garanti (se vore AGB):

- Kontrollér med hjælp af fakturadatoen om din PeniMaster® er ældre end 3 år.
- Returnér defekte del sammen med en fakturakopi til nedestående adresse. Husk tilstrækkelig porto. ELLER
- tilsend os en tydelige læselig (bedre læselig) digital fakturakopi (fx ved hjælp af en scanner) og et billede af defekte del, hvorpå defekten tydeligt kan ses. Tilsend begge dokumenter som jpg- og/eller gif-filer til:
→ www.penis.de

HOLDEREM, KOMFORTBÅND OG RESERVEDELE MED FORFALDEN GARANTİ

Bestil holderemme, komfortbånd eller også reserve dele til apparater uden garantikrav på følgende hjemmeside www.penis.de/reserve dele

KOSTELOZE RESERVEONDERDELEN (GARANTIE)

U ontvangt gedurende 36 maanden kosteloze reserveonderdelen met uitzondering van de houderriemen, comfortbanden en reserveonderdelen met afgelopen garantie (zie onze Algemene Voorwaarden):

- Controleer met behulp van de factuurdatum dat uw PeniMaster® niet ouder dan 3 jaar is.
- Stuur het defecte onderdeel samen met een kopie van de factuur in een voldoende gefrankeerd poststuk naar beneden vermeld adres. □F
- Maak een goed leesbare digitale kopie van uw factuur (bijv. met een scanner) en een foto van het defecte onderdeel waarop het defect duidelijk te herkennen is. Stuur de twee documenten als .jpg- en/ of .gif-bestanden naar: → www.penis.de

HOUDERRIEMEN, COMFORTBANDEN EN RESERVEONDERDELEN MET AFGELOPEN GARANTIE

Gebruik voor de bestelling van reserveonderdelen voor toestellen zonder garantierecht, houderriemen of comfortbanden het volgende internetadres: www.penis.de/onderdelen



Gebruiksaanleitung! Bitte aufmerksam lesen! Instructions for use! Please read carefully. Mode d'emploi. Veuillez lire attentivement avant utilisation! Istruzioni per l'uso. Leggere attentamente prima dell'uso! Instrucciones de uso. ¡Leer atentamente antes de usarlo! Manual de instruções! Leia com atenção! Lutfen kullannilavuzunu dikkatlice okuyunuz! Betjeningsvejledning! Læses opmærksomt! Gebruiksaanwijzing! A. u. b. zorgvuldig doorlezen! Bruksanvisning! Läs igenom uppmärksamt! Návod k použití! Prosíme čtěte pozorně! Руководство по применению! Пожалуйста, прочтеть внимательно!

PENIMASTER®



Zur dauerhaften Penisvergrößerung und -begradigung For permanent penis enlargement and straightening Pour un allongement et une correction durable du pénis Per un ingrandimento ed un raddrizzamento del pene duraturi Para agrandar y reajustar la curvatura del pene de manera duradera Para aumentar e endireitar o pénis de forma duradoura Kalıcı penis büyütmeye ve düzeltmeye için Til varig penis forstørrelse og udbedring af krumning Voor een duurzame penisvergroting en -correctie För varaktigt penisförstoring och -uträtning Pro trvalé zvětšení a napřimení penisu Для долговременного увеличения и Для долговременного увеличения и

 **WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL FREUDE UND ERFOLG MIT IHREM PENIMASTER®!**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.penis.de

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Es gelten unsere AGBs. Stand dieser Information: 04/2008

 **WE HOPE YOUR PENIMASTER® LEADS TO GREAT SUCCESS AND SATISFACTION!**

You can find further information on the internet at www.penis.de

We reserve the right to make changes that constitute technical improvements (See our general terms and conditions). Date of this information: 04/2008

 **NOUS ESPÉRONS QUE LE PENIMASTER® VOUS APPORTERA PLAISIR ET SATISFACTION!**

Informations complémentaires sur Internet: www.penis.de

Sous réserve de modifications susceptibles d'apporter une amélioration technique. Version de ces informations: 04/2008

 **LE AUGURIAMO OGNI SUCCESSO CON IL SUO PENIMASTER®!**

È possibile trovare ulteriori informazioni in internet al sito www.penis.de

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Valgono le nostre condizioni generali d'affari. Stato della presente nota informativa: 04/2008

 **¡LE DESEAMOS TODO EL ÉXITO Y LA SATISFACCIÓN QUE MERECE CON SU PENIMASTER®!**

Información más detallada disponible en Internet en la página www.penis.de

Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas.

Rígen nuestras CGC. Actualización de la presente información: 04/2008

 **ESPEREMOS QUE FIQUE SATISFEITO COM O PRODUTO E OBTENHA BONS RESULTADOS COM PENIMASTER®!**

Para mais informações, consulte o na Internet o website: www.penis.de

Estão reservadas as alterações que sirvam propósitos técnicos. São válidas as nossas condições gerais de venda. Estado deste informação: 04/2008

MSP Concept GmbH & Co. KG
Emser Straße 39 d · D-10719 Berlin
www.penis.de
Deutschland: 030 23 63 85 65
Worldwide: 0049 30 23 63 85 65

 **RESERVDELAR KOSTNADSFRI (GARANTI)**
Så får Du 36 månaders utbytesrätt på alla delar med undantag för remmar, komfortband och reservdelar med utgången garantitid (se våra garantier):

- Bedöm med hjälp av räkningsdatumet om Din PeniMaster® inte är äldre än 3 år.
- Skicka den defekta delen tillsammans med en kopia på inköpsräkningen och tillräckligt frankerad till nedanstående adress. ELLER
- Gör en väl läslig (förbättrat läslig) digital kopia av din räkning (t. ex med en scanner) och ett foto på den defekta delen, på vilket defekten syns tydligt. Skicka båda dokumenten som .jpg- och/eller .gif-filer till:
→ www.penis.de

HÅLLREMMAR, KOMFORTBAND OCH RESERVDELAR MED UTGÅNGEN GARANTI.

Vid beställning av reservdelar till utrustning utan garantianspråk, hållremmar eller komfortband, Vänligen använd följande Internetadress: www.penis.de/reservdelar

 **BEZPLATNÉ NÁHRADNÍ DÍLY (ZÁRUKA)**

Takto obdržíte 36 měsíců bezplatnou náhradu na všechny díly s výjimkou tržmenových držáků, komfortních pásků a náhradních dílů s prošlou zárukou (viz naše VOP):

- Zkontrolujte na základě data účtenky, zda Váš PeniMaster® není starší než 3 roky.
- Zašlete defektní díl společně s kopií dokladu o koupi správně ofrankovanou zásilkou na niže uvedenou adresu. НЕВО
- Vytvořte dobře čitelnou digitální kopii Vašeho účtu (např. skenerem) a fotografii defektního dílu, na které je zřetelně rozez natelná závada. Zašlete oba dokumenty jako soubory .jpg a/nebo gif na:
→ www.penis.de

TŘMENOVÉ DRŽÁKY, KOMFORTNÍ PÁSKY A NÁHRADNÍ DÍLY S PROŠLOU ZÁRUKOU

Prosíme, použijte pro objednávání náhradních dílů pro přístroje bez nároku na záruku, tržmenové držáky nebo komfortní pásky následující internetovou adresu: www.penis.de/nahradni-dily

 **БЕСПЛАТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ (ГАРАНТИЯ)**


Таким образом, Вы получаете 36 месяцев на бесплатную замену всех деталей за исключением удерживающих ремней, поясков комфорта и запасных деталей с истекшим сроком гарантии (смотри наши Общие условия заключения торговых сделок):

- С помощью даты выписки счета проверьте, не прошло ли со времени покупки Вашего аппарата ПениМастер® более трех лет.
- Пошлите с оплаченным почтовым сбором дефектную деталь вместе с копией фактуры покупки по нижеуказанному адресу. ИЛИ
- Выполните четкую (лучше разборчивую) цифровую копию Вашего счета (например, с помощью сканирующего устройства) и фотографию дефектной детали, на которой можно отчетливо распознать дефект. Пошлите оба документа в форме файлов .jpg и/или .gif по адресу: → www.penis.de

УДЕРЖИВАЮЩИЕ РЕМНИ, ПОЯСКИ КОМФОРТА И ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГАРАНТИИ

Пожалуйста, для того чтобы заказать запасные детали для аппаратов без права на гарантийный ремонт, удерживающие ремни или пояски комфорта, используйте следующий адрес в Интернете: www.penis.de/spare-parts-russian



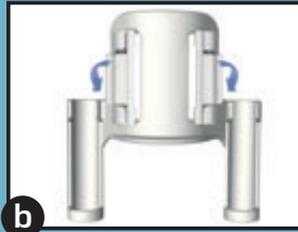

SIZE PENIMASTER® İLE MUTLULUK VE BAŞARI DILIYORUZ!

Daha detaylı bilgileri internette www.penis.de adresinde bulabilirsiniz.

Teknik geliştirme nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklı tutulur. Firmamızın Genel Şirket Şartnamesi geçerlidir. Bu bilgilerin güncelliği: 04/2008



DU ØNSKES MEGET GLÆDE OG SUCCESSION MED DIN PENIMASTER®!

Yderligere informationer står på vor hjemmeside www.penis.de

Ændringer, der tjener tekniske forbedringer, forbeholdes. Vore almindelige forretningsbetingelser (AGB) er gældende. Stand af denne information: 04/2008



WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER EN SUCCESSION MET UW PENIMASTER®!

Verdere informatie vindt u op het internet op www.penis.de

Wijzigingen met het oog op de technische vooruitgang voorbehouden. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Datum van deze informatie: 04/2008



VI ÖNSKAR DIG MYCKET GLÄDJE OCH FRAMGÅNG MED DIN PENIMASTER®!

Ytterligare information finner du på Internet under www.penis.de

Vi reserverar oss för sådana ändringar uppkomna genom den tekniska utvecklingen. Det gäller våra garantier. Denna information finns på: 04/2008



PŘEJEME VÁM MNOHO RADOSTI A ÚSPĚCHU S VAŠÍM PENIMASTER®!

Další informace najdete na internetu na stránce www.penis.de

Změny, sloužící technickému pokroku, vyhrazeny. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Stav této informace: 04/2008



МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ МНОГО УДОВОЛЬСТВИЯ И УСПЕХА С ВАШИМ АППАРАТОМ ПЕНИМАСТЕР®!

Дальнейшую информацию Вы найдете в Интернете в www.penis.de

Оставлено за собой право на изменения, способствующие техническому прогрессу. Имеют силу наши Общие условия заключения торговых сделок (AGB). Состояние этой информации на: 04/2008

KOSTENLOSE ERSATZTEILE (GARANTIE)

So erhalten Sie 36 Monate kostenlosen Ersatz auf alle Teile mit Ausnahme der Halteriemern, Komfortbänder und Ersatzteile mit abgelaufener Garantie (s. unsere AGBs):

- Prüfen Sie anhand des Rechnungsdatums, ob Ihr PeniMaster® nicht älter als 3 Jahre ist.
- Senden Sie das defekte Teil zusammen mit einer Kopie der Kaufrechnung ausreichend frankiert an unten stehende Adresse. ODER
- Machen Sie eine gut leserliche digitale Kopie Ihrer Rechnung (z.B. mit einem Scanner) und ein Foto des defekten Teils, auf dem der Defekt deutlich zu erkennen ist. Senden Sie beide Dokumente als .jpg- und/oder .gif-Dateien an: ➔ www.penis.de

HALTERIEMEN, KOMFORTBÄNDER UND ERSATZTEILE MIT ABGELAUFENER GARANTIE

Bitte nutzen Sie zur Bestellung von Ersatzteilen für Geräte ohne Garantieanspruch, Halteriemern oder Komfortbändern folgende Internetadresse: www.penis.de/ersatzteile

REPLACEMENT PARTS FREE OF CHARGE (WARRANTY)

We will provide replacements for all parts for 36 months, except for the fastening belt, comfort bands and spare parts with expired warranty (see our general terms and conditions).

- Check the date on the receipt to make sure your PeniMaster® is no older than 3 years.
- Send the defect part, with sufficient postage, together with a copy of the receipt to the address given below. OR
- Make a clearly legible digital copy of your receipt (e.g. with a scanner) and a photograph of the defect part in which the defect is clearly recognizable. Send both documents as .jpg and/or .gif files to: ➔ www.penis.de

FASTENING BELTS, COMFORT BANDS AND REPLACEMENT PARTS WITH EXPIRED WARRANTY

Please use the following internet address to order replacement parts for devices without warranty, fastening belts or comfort bands: www.penis.de/spare-parts

PIÈCES DE RECHANGE GRATUITES (GARANTIE)

Vous recevez gratuitement pendant 36 mois toutes les pièces de rechange, à l'exception des courroies de maintien, bandes de confort et pièces de rechange dont la garantie a expiré (cf. nos CGV).

- Vérifier au moyen de la date d'émission de la facture si votre PeniMaster® n'a pas été acheté il y a plus de 3 ans.
- Envoyer la pièce défectueuse assortie d'une copie de la facture de vente à l'adresse située ci-dessous (veillez à affranchir suffisamment le pli). O U
- Faites une copie numérique bien lisible de votre facture (par ex. avec un scanner) ainsi qu'une photo de la pièce défectueuse sur laquelle le défaut apparaît clairement. Envoyez les deux documents au format .jpg ou .gif à l'adresse suivante : ➔ www.penis.de

COURROIES DE MAINTIEN, BANDES DE CONFORT ET PIÈCES DE RECHANGE DONT LA GARANTIE A EXPIRÉ

Pour commander les pièces de rechange d'appareils dont la garantie a expiré, les courroies de maintien ou bandes de confort, veuillez utiliser l'adresse Internet suivante : www.penis.de/pièces-de-rechange

PEZZI DI RICAMBIO GRATUITI (GARANZIA)

In questo modo riceverà ogni 36 mesi gratuitamente pezzi di ricambio per tutti i componenti dell'apparecchio ad eccezione di cinghie di tenuta, fasce confort e pezzi di ricambio per i quali sia scaduta la garanzia (si vedano le nostre condizioni generali di affari).

- Verifichi, controllando la data della fattura, che il Suo PeniMaster® non abbia più di tre anni.
- Inviare le parti difettose con una fotocopia della ricevuta d'acquisto in busta affrancata con l'importo corretto all'indirizzo di seguito riportato. OPPURE
- Faccia una copia digitale ben leggibile della ricevuta (ad esempio con uno scanner) ed una foto della parte difettosa, dalla quale sia ben riconoscibile il difetto. Inviare entrambi i documenti in forma di file .jpg- e/o .gif a: ➔ www.penis.de

CINGHIE DI TENUTA, FASCE CONFORT E PARTI DI RICAMBIO PER LE QUALI SIA SCADUTA LA GARANZIA.

Per ordinare parti di ricambio per apparecchi non in garanzia, cinghie di tenuta o fasce confort utilizzare il seguente indirizzo internet: www.penis.de/pezzi-di-ricambio

PIEZAS DE RECAMBIO GRATUITAS (GARANTÍA)

Así obtendrá piezas de recambio de todas las piezas gratuitamente durante 36 meses, a excepción de las correas de sujeción, las cintas de confort y las piezas de recambio con garantía vencida (ver nuestras CGC):

- Verificar según la fecha de la factura de compra, si su PeniMaster® no tiene más de 3 años.
- Enviar la pieza defectuosa junto con una copia de la factura de compra con porte de correo pagado a la dirección mencionada a continuación: BIEN
- Hacer una copia digital bien legible de su factura (p.ej. con un escáner) y de la foto de la pieza defectuosa donde se vea bien el defecto. Enviar ambos documentos como archivos .jpg y/o .gif a: ➔ www.penis.de

CORREAS DE SUJECIÓN, CINTAS DE CONFORT Y PIEZAS DE RECAMBIO CON GARANTÍA VENCIDA

Para pedir las piezas de recambio para aparatos sin derecho a garantía, correas de sujeción o cintas de confort, utilizar la dirección en Internet siguiente: www.penis.de/piezas-de-repuesto

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO GRATUITAS (GARANTIA)

Assim, obtém 36 meses de substituição de peças, com exceção dos cintos de retenção, da fita de conforto e de peças de substituição com garantia limitada (ver as nossas condições gerais de venda):

- verifique, de acordo com a data da factura, se o seu PeniMaster® não tem mais do que 3 anos.
- envie as peças com defeito juntamente com uma cópia da factura de compra suficientemente franqueada para a morada abaixo referida. O U
- faça uma cópia digital bem legível (que se consiga ler melhor) da sua factura (por ex. com um scanner) e junte uma foto da peça com defeito, na qual se consiga detectar de forma evidente o defeito na peça. Envie os dois documentos como ficheiros .jpg e/ou .gif: ➔ www.penis.de

CINTOS DE RETENÇÃO, FITA DE CONFORTO E PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO COM GARANTIA LIMITADA

Para encomendar peças de substituição para aparelhos não abrangidos pela garantia, cintos de conforto ou fitas de conforto, utilize o seguinte endereço da Internet: www.penis.de/peças-de-substituicao



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank für den Kauf von PeniMaster®. Sie haben damit das einzige bekannte Prinzip gewählt, um Ihren Penis ohne risikoreiche Operation schmerzfrei und dauerhaft positiv zu verändern. Wenn Sie PeniMaster® gemäß dieser Gebrauchsanweisung anwenden, wird Ihr Penis im schlaffen als auch im erigierten Zustand länger und dicker werden. Zudem eignet sich PeniMaster® zur Korrektur unerwünschter Peniskrümmungen und wahlweise auch zur Verlängerung der Vorhaut (z.B. für beschnittene Anwender).

Die verbesserte Durchblutung und das Training der Penismuskulatur steigern in vielen Fällen das Lustempfinden, die Erektionsfähigkeit und die sexuelle Ausdauer. Viele Anwender besiegen durch die Erfolge mit PeniMaster® langjährige Komplexe, die sie an einem freien, unbefangenen Sexualleben gehindert haben. Auch die Suche nach einem Partner fällt oft mit dem Bewusstsein leichter, in körperlicher Hinsicht „gut dazustehen“.

Sie können PeniMaster® problemlos selbst ohne Hilfe Dritter (z.B. einem Arzt) anwenden. PeniMaster® erzielt bei beschnittenen als auch unbeschnittenen Anwendern gleich gute Erfolge. PeniMaster® ist ein professionelles Gerät und für jedes Alter geeignet. Dennoch empfehlen wir den Einsatz erst mit Vollendung der Volljährigkeit, damit der Penis vor der Behandlung seine natürliche Länge erreicht hat.

FUNKTIONSPRINZIP

Das Funktionsprinzip von PeniMaster® ist einfach: Durch dauerhafte Zugeinwirkung über einen längeren Zeitraum hinweg wird das Zellgewebe des Penis zum Wachstum angeregt: Es entstehen neue Körperzellen, der Penis wird länger und dicker. Unregelmäßige Gewebeverteilungen im Penis – die Ursache für Peniskrümmungen – werden durch neues Gewebe ausgeglichen: Der Penis wird gerader. Mit PeniMaster® kann die Vorhaut stärker als der restliche Penis gestreckt werden. Somit ist bei Bedarf auch eine Vorhautverlängerung möglich (siehe Anleitung).

Hinweis: Obwohl der Penis während der Streckung dünner aussieht, wird er nach der Behandlung wieder seinen ursprünglichen Umfang haben oder dicker sein!

Das Prinzip des Wachstums durch Dehnung macht sich die Medizin beispielsweise auch in der Orthopädie oder in der Hautchirurgie zunutze, wo ebenfalls spezielle Streckgeräte zum Einsatz kommen.

Die Möglichkeit, den Penis durch dauerhafte Streckung zu verlängern, wird übrigens seit Jahrhunderten genutzt: Die Karamojong (Eingeborene in Nord-Uganda) oder die Sadhus (Indien) erreichen durch Anbringen von Gewichten am Penis beeindruckende Resultate (vgl. Encyclopaedia Britannica; Stern Nr. 49/95).

BENUTZUNG VON PENIMASTER®

ANWENDUNG

Der Erfolg von PeniMaster® hängt zum einen von der auf den Penis ausgeübten Zugkraft, zum anderen von der Dauer der Anwendung ab. Nur eine gute Balance zwischen Zugkraft und Tragedauer gewährleistet optimale Ergebnisse!

[!] Grundsätzlich sollten Sie das Tragen von PeniMaster® immer als angenehm, keinesfalls jedoch als schmerzhaft empfinden! Schmerzen sind ein sicheres Zeichen für eine Fehlanwendung, etwa durch zu stark eingestellte Zug- oder Haltekräfte!

VORBEREITUNGEN ZUM ANLEGEN

- Ziehen Sie die Auflagefläche von den Haltestangen.
- Ziehen Sie den Halteriemern aus den Schlitzen der Auflagefläche.
WICHTIG: Drücken Sie hierbei beide Arretierflügel auf der Unterseite der Halteaufflage herunter. Andernfalls kann der Halteriemern beschädigt werden. Dies gilt auch für das Ablegen nach der Anwendung oder wenn die Fixierkraft auf den Penis durch Lockern des Halteriemerns schwächer eingestellt werden soll!
- Schrauben Sie die Feinjustierschrauben auf kleinste Höhe (so dass kein Schraubgewinde mehr zu sehen ist).
- Stellen Sie die richtige Gesamtlänge des Gerätes (entspricht ungefähr der Länge Ihres steifen Penis plus 1,5 cm) durch Entfernen, Austauschen oder Ineinanderschrauben der mitgelieferten Verlängerungsstangen ein. Die Stangen haben eine Länge von 2, 4, 6 und 8 cm und können jeweils ineinander geschraubt werden. Dieses ergibt folgende mögliche Ausbaulängen: 10 cm (Stangen 8+2); 12 cm (8+4); 14 cm (8+6); 16 cm (8+2+6); 18 cm (8+4+6); 20 cm (8+2+4+6).
[!] Die sechs Ministangen (bei Lieferung zu zwei Stangen von je 1,5 cm zusammengeschaubt) dienen zur Feineinstellung von +0,5, +1,0 oder +1,5 cm.

ANLEGEN VON PENIMASTER®


- Dehnen Sie den Penis von Hand etwa eine Minute. Führen Sie den schlaffen Penis durch das Ansatzstück.
- FIXIER-VARIANTE I** – Vorhaut stärker verlängern: Um die Vorhaut stärker bzw. überproportional zum Penis wachsen zu lassen (z.B. um bei einem beschnittenen Penis Vorhaut zurückzugewinnen), legen Sie das Komfortband über die verbliebene (Vor-)Haut, ggf. auch mit etwas Abstand zur Eichel, um den Penis. Auf diese Weise wird die Haut intensiver gestreckt und stärker zum Wachsen angeregt.
FIXIER-VARIANTE II – Vorhaut proportional zum Penis verlängern: Um die Vorhaut nur so viel wie den Penis wachsen zu lassen, ziehen Sie die Vorhaut zurück und legen das Komfortband direkt hinter die Eichel um den Penis. Auf diese Weise wird die Haut schwächer gestreckt und weniger als in Fixier-Variante I zum Wachsen angeregt.
- Legen Sie den Halteriemern über das Komfortband, so dass die anatomisch geformte Krümmung im Halteriemern (zwischen den beiden „Ohren“) zur Eichel zeigt. *Sofern angenehm, kann das Komfortband mehrfach um den Penis gewickelt, ansonsten entsprechend gekürzt oder auch weggelassen werden.*
- Stecken Sie die beiden Enden des Halteriemerns wieder in die Schlitz der Auflagefläche. Um das Einklemmen von Haut in den Schlitzen der Auflagefläche zu vermeiden, legen Sie nun bitte einen Finger zwischen Penis und Auflagefläche. Ziehen Sie die Enden des Halteriemerns fest an und anschließend den Finger heraus.
- Der Penis ist nun auf der Halteaufflage fixiert. [!] *Vermeiden Sie es, den Penis übermäßig zu quetschen!* Sollten der Penis oder die Eichel sich verfärben, lösen Sie bitte umgehend den Halteriemern und fördern Sie die Blutzirkulation durch Massage. Beobachten Sie insbesondere in der Eingewöhnungsphase der ersten Tage, ob Sie negative Veränderungen im Aussehen oder in der Funktion des Penis bemerken und pausieren Sie, bis die Symptome abgeklungen sind.
- Drücken Sie die Auflagefläche mit dem eingespannten Penis auf das Ende der Verlängerungsstangen.
- Sie können das Gerät mit gleich gutem Ergebnis wahlweise nach oben oder unten tragen.
- Regulieren Sie die Zugkraft von PeniMaster® durch Heraus-schrauben der Schraubgewinde (siehe auch nächster Punkt „Einstellen der Zugkraft“).

EINSTELLEN DER ZUGKRAFT

Am Ende der Haltestangen befinden sich jeweils **5 EINGEKERBTE MARKIERUNGEN IN DEN METALLSTANGEN**.

Diese zeigen nach dem Prinzip einer Federwaage an, wie stark die ausgeübte Zugkraft auf den Penis ist:

MARKIERUNG

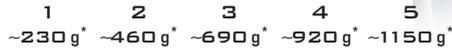

Beispiel für das Ablesen der Federwaage: Federt das Gerät z.B. nach dem Anlegen so weit ein, dass Sie nur noch 3 der 5 Markierungen sehen können, beträgt die eingestellte Zugkraft zwischen 460 g und 690 g. Können Sie nur noch die letzte Markierung sehen, beträgt die Zugkraft zwischen 920 g und 1150 g.

Um die Dehnung auf den Penis zu erhöhen, drehen Sie bitte beide Einstellschrauben gleichmäßig gegen den Uhrzeigersinn. Hierdurch wird die Gesamtlänge des Gerätes vergrößert. Um die Zugkraft schwächer einzustellen, drehen Sie die Einstellschrauben in die andere Richtung (im Uhrzeigersinn).

Hinweis: Das Schraubgewinde darf erst herausgeschraubt werden, wenn der Penis durch Auswahl der richtigen Stangenlänge (s.o.) bereits leicht gedehnt wird. Ansonsten kann keine oder nur ungenügend Zugkraft aufgebaut werden! Stellen Sie die Zugkraft zu Beginn der Behandlung nur schwach ein (z.B. zwischen 0 g und 230 g), um sich an das Gerät zu gewöhnen. Dies kann bis zu zwei Wochen dauern. Sie trainieren Ihren Penis optimal, wenn Sie immer die höchstmögliche Zugkraft einstellen, mit der Sie das Gerät ohne Probleme 60 bis 90 Minuten tragen können.

Hinweis: Sollte sich der Penis einige Zeit nach dem Anlegen nachdehnen und die Zugkraft hierdurch schwächer werden, regulieren Sie die Zugkraft bitte nach! Steigern Sie die Zugkraft langsam über Wochen, bis Sie möglichst nur noch eine Markierung an der Federwaage sehen. Bei auftretenden Schmerzen stellen Sie PeniMaster® bitte schwächer ein!

ÜBERMÄSSIGE ODER SCHMERZHAFTE HALTE- UND ZUGKRÄFTE KÖNNEN SICH NEGATIV AUF DAS ZELLWACHSTUM AUSWIRKEN!

[!] Belastungen über 1150 g sollten Sie aus Sicherheitsgründen auch dann nicht einstellen, wenn Sie das Gefühl haben, damit keine Probleme zu haben.

TRAGEDAUER

Sie sollten PeniMaster® täglich mindestens 3 Stunden anlegen. Längere Tragezeiten verbessern das Ergebnis! Nach jeweils 60 bis 90 Minuten machen Sie bitte eine Pause von etwa 15 Minuten und massieren den Penis, um die Durchblutung anzuregen. Diese kurzen Pausen fördern den Wachstumsprozess!

Sie können PeniMaster® – nach ausreichender Eingewöhnungszeit – täglich beliebig lange unter weiter Kleidung tragen (bitte denken Sie an die Pausen alle 60 bis 90 Minuten!). Tragezeiten von 6 oder mehr Stunden pro Tag führen zu optimalen Wachstumsergebnissen. Grundsätzlich gibt es keine zeitliche Begrenzung, wieviele Monate Sie PeniMaster® maximal anwenden können. Im Gegenteil: Je länger Sie PeniMaster® tragen, desto deutlicher wird das Resultat. Das Minimum für einen sichtbaren Erfolg liegt bei einer Tragezeit von etwa 3 Stunden täglich über einen Zeitraum von einem Monat. Ergebnisse, die während der ersten vier Wochen erzielt werden, können zum Teil auf Gewebedehnung basieren und sind gegebenenfalls nicht dauerhaft. Da während des Schlafens keine Tragepausen gemacht werden können, wird die Anwendung hierbei nicht empfohlen und sollte nur erwogen werden, wenn ansonsten keine ausreichenden Tragezeiten erreicht werden können. Vor der Anwendung im Schlaf muss der Benutzer hinreichend Erfahrung mit den für ihn richtigen Einstellungen für eine mehrstündige Anwendung im Wachzustand gesammelt haben.

Sorgen Sie sich nicht um Ihr gutes Resultat, wenn Sie PeniMaster® mehrere Tage oder über einen längeren Zeitraum nicht tragen können, etwa, weil Sie auf Reisen sind: Das bis dahin erreichte Wachstum bleibt erhalten und setzt sich fort, wenn Sie die Anwendung wieder aufnehmen. Und bedenken Sie bitte, dass die Behandlung Ihren Penis wachsen lässt – dies benötigt naturgemäß Zeit! Seien Sie zuversichtlich und verlieren Sie nicht die Geduld, wenn Sie nach wenigen Tagen noch kein Ergebnis sehen: Sie werden mit einem „Penis nach Maß“ für Ihren Durchhaltewillen belohnt!

HYGIENEHINWEISE

Damit Sie lange Freude an Ihrem PeniMaster® haben, reinigen Sie Ihren Penis und PeniMaster® bitte vor und nach jeder Anwendung mit lauwarmem Wasser und Seife. Trocknen Sie den Penis und das Gerät anschließend gut ab. Dies dient der allgemeinen Hygiene, beugt Entzündungen vor und erleichtert außerdem die Fixierung des Penis durch den Halteriemens. Dieser rutscht durch Körperfette, Puder oder fetthaltige Pflegeprodukte schneller vom Penis ab.

Das Gerät ist rostfrei und wird durch Wasser keinen Schaden nehmen.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG UND WARNHINWEISE

Bleibende Nebenwirkungen durch die Anwendung von PeniMaster® sind nicht bekannt. Während der Anwendung sind leichte Hautrötungen im Bereich des Halteriemens aufgrund mechanischer Beanspruchung normal. Diese sind nicht schmerzhaft und klingen nach dem Ablegen von PeniMaster® schnell wieder ab.

Nach einer Anwendung von PeniMaster® kann es vorteilhaft sein, den Penis mit einer Feuchtigkeitslotion einzucremen, um die Haut zu entspannen.

Bitte beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

PENIMASTER® DARF NICHT ANGEWENDET WERDEN

- unter Alkoholeinfluss
- unter Drogeneinfluss
- unter dem Einfluss beruhigender Mittel
- unter dem Einfluss von Schlafmitteln oder Mitteln, die das Schmerzempfinden herabsetzen
- bei bekannter Chromallergie und bei Unverträglichkeit von Polycarbonat (PC) und TPE
- bei bekannten Problemen mit dem Penis, den Hoden oder der Harnröhre
- bei Venen- oder Bindegewebsschwäche
- bei bestehenden oder auftretenden Schmerzen im Penis oder den Hoden
- bei Penisimplantaten

Treten während der Anwendung von PeniMaster® plötzlich Schmerzen, farbliche Veränderungen oder sonstige äußerliche Irritationen oder funktionale Veränderungen des Penis, der Eichel oder der Hoden auf, ist die Behandlung umgehend auszusetzen und erst nach dem Abklingen fortzuführen. Sollten die Symptome nach dem Aussetzen der Behandlung anhalten oder sich verschlechtern, ist vorzichtshalber ein Arzt (z.B. Urologe) aufzusuchen. Sollten Sie aufgrund von körperlichen Einschränkungen oder einer bekannten Krankheit nicht sicher sein, ob die Anwendung von PeniMaster® für Sie geeignet ist, fragen Sie bitte vor der Selbstanwendung Ihren Arzt (Urologen).